

[Logo : **Owlet®**]

## **Référence rapide de Dream Sock uniquement**

**Utiliser l'application pour la configuration initiale**

Service clientèle Owlet Baby Care

Numéro gratuit : +1 (844) 334-5330

E-mail : [contact@owletcare.com](mailto:contact@owletcare.com)

<https://support.owletcare.com/hc/en-us>

Date d'émission : 2024-01-22

QRG-19.0316 Rév. 3





AVERTISSEMENT ! Gardez toujours l'appareil et les accessoires hors de portée des enfants. Les petites pièces, notamment le capteur et les câbles, présentent un risque potentiel d'étouffement. Placez la station de base à au moins trois pieds du berceau, car le cordon peut présenter un risque d'étranglement.

---



AVERTISSEMENT ! L'application pour appareil mobile n'est pas destinée à être considérée comme la principale source de notifications. La station de base est la principale source de notifications. Gardez toujours la station de base à portée audible. Assurez-vous que la station de base peut être entendue malgré les bruits ambiants (exemple : bruits de machines ou de téléviseurs). Assurez-vous que la station de base n'est pas couverte, car cela pourrait étouffer les sons de l'alarme.

---



POUR UTILISER CORRECTEMENT NOS PRODUITS ET POUR PRENDRE SOIN DE VOTRE ENFANT : RÉPONDEZ RAPIDEMENT DÈS QU'UNE NOTIFICATION EST ÉMISE.

---



AVERTISSEMENT ! L'OWLET DREAM SOCK NE REMPLACE PAS LA SUPERVISION D'UN ADULTE, LES BONNES PRATIQUES PARENTALES OU LES BONNES PRATIQUES DE SOMMEIL.

---



La Dream Sock n'est pas indiquée pour une utilisation chez les enfants/nourrissons ayant des problèmes de santé. Pour les bébés ayant des problèmes de santé, veuillez consulter votre professionnel de la santé pour déterminer si l'Owlet Dream Sock est adaptée ou non à votre enfant.

---



L'Owlet Dream Sock avec notifications de santé est destinée à être utilisée uniquement avec les bébés de 0 à 18 mois pesant de 2,5 à 13,6 kg.

# Démarrage

## Télécharger l'application



Utilisez l'application Owlet Dream pour configurer votre nouvelle Dream Sock.

Après le téléchargement, suivez les étapes de configuration dans l'application. L'application vous guidera tout au long des étapes suivantes :

- ✓ Création d'un compte
- ✓ Confirmation de compte
- ✓ Configuration de l'appareil
- ✓ Connexion au Wi-Fi
- ✓ Enregistrement de la station de base
- ✓ Appariement de la Sock
- ✓ Création d'un profil enfant
- ✓ Apprentissage obligatoire

## L'Owlet Dream Sock est-elle faite pour vous et votre bébé ?

0-18 mois

2,5 - 13,6 kg

- Destiné aux bébés âgés de **0 à 18 mois** et pesant entre **2,5 et 13,6 kg**.
- Ne remplace pas la supervision d'un soignant.

## Aperçu de l'appareil

La Sock maintient le capteur sur le pied du bébé. Le capteur recueille les lectures de votre bébé et les envoie à la station de base, qui les envoie à votre appareil intelligent.



**Sock taille 1 et 2**  
chaussette droite et  
gauche pour chaque taille



**Capteur de la Sock**



**Station de base**



**Câble d'alimentation  
et prise USB**



**Adaptateur électrique**



**Guide de  
démarrage rapide**



**Application  
Dream**

# Taille, ajustement et placement de la Sock

Une taille, un ajustement et un placement appropriés de la Sock sont essentiels pour la performance de Dream Sock.

## 1. Retirez la Sock de la station de base

Lorsque vous débranchez la Sock du port de charge, la station de base se mettra à clignoter en vert, indiquant ainsi que la Sock recherche les lectures de votre enfant. Il est temps d'enfiler la Sock sur le pied de votre enfant.

## 2. Choisissez parmi 2 tailles de Sock

Chaque boîte contient 4 chaussettes (2 tailles pour le pied gauche et le pied droit). Utilisez le guide ci-dessous pour choisir une taille de chaussette de départ en fonction du poids. Changez ensuite de taille de chaussette en fonction de l'ajustement réel.




**ATTENTION.**

Vérifiez régulièrement l'ajustement de la Sock. La taille réelle du pied du bébé peut différer des directives ci-dessus et les bébés grandissent rapidement. Arrêtez d'utiliser le système lorsque votre bébé atteint **13,6 kg** ou devient trop grand pour la plus grande chaussette.


## 3. Insérer le capteur (s'il n'est pas déjà inséré)

Fixez le capteur à la Sock en alignant l'encoche du capteur avec l'encoche de la Sock. Étirez le trou de la Sock au-dessus du capteur.

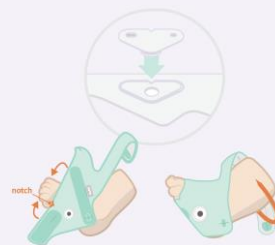

## 4. Positionner la Sock

Placez la Sock sur le pied correspondant (gauche/droite) avec l'encoche à l'extérieur du pied derrière le petit doigt. La Sock ne doit **PAS** toucher les orteils. Le mot « TOP » doit être placé sur le dessus du pied, près des orteils et non au niveau de la cheville.

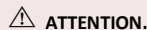

**ATTENTION.**

N'étirez pas les sangles lors de la fixation. Étirer les sangles entraînera un serrage excessif et un risque accru de marques rouges ou d'irritation cutanée.

## 5. Vérifier l'ajustement et le placement de la Sock




### AVERTISSEMENT.

Un ajustement ou un entretien inapproprié de la Sock peut entraîner des blessures cutanées.

### Associer la Sock au pied

Assurez-vous d'utiliser la chaussette gauche pour le pied gauche et la chaussette droite pour le pied droit. Chaque chaussette est marquée « Droite » ou « Gauche ».

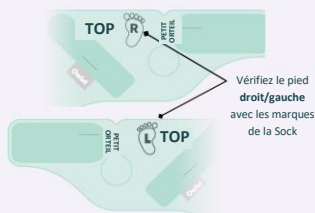

### Protéger les parties sensibles


- Assurez-vous que la partie abrasive de l'attache ne touche pas la peau.
- La Sock ne doit pas dépasser les orteils.



## Vérifier la taille de la Sock


### Sock trop petite

Si l'une ou l'autre des sangles ne parvient pas à atteindre naturellement l'attache, essayez une taille de Sock plus grande. N'étirez PAS les sangles et ne serrez pas trop la Sock, car cela pourrait être inconfortable pour votre enfant.

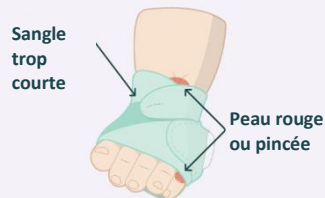

### Sock trop grande

Si l'une des sangles dépasse l'attache, essayez une taille de Sock plus petite. La Sock et les sangles doivent être bien ajustées contre le pied.

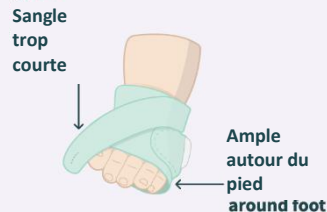

### Vérifier les sangles

Vérifiez que les sangles sont correctement ajustées. Ne PAS trop serrer. Les sangles doivent reposer à plat contre la peau mais ne pas appuyer sur la peau. N'étirez pas les sangles lors de la fixation, cela entraînerait un serrage excessif.

## 6. Vérifiez la station de base

Une fois la Sock au pied de l'enfant, vérifiez la station de base. Une fois qu'elle clignote lentement en vert, cela signifie que les lectures de votre enfant sont captées et sont normales.

# Éviter les marques rouges et les irritations cutanées

Une utilisation incorrecte de la Sock peut entraîner une gêne, pouvant conduire à des marques rouges, des plaies ou des cloques sur le pied de votre bébé.

## Éviter les irritations cutanées

- Sélectionnez la bonne taille de Sock pour votre bébé.
- Évitez d'utiliser des lotions ou des poudres sous la Sock. Gardez la peau propre et sèche.
- Assurez-vous que la Sock est positionnée et ajustée correctement.
- Vérifiez la peau toutes les 4 heures pendant la première semaine d'utilisation et après avoir changé la taille de Sock. Le marquage temporaire dû au contact de la Sock est normal s'il s'estompe dans les 8 heures.
- Alternez les pieds au moins toutes les 8 heures.
- Lavez la Sock et le capteur à la main toutes les 2 semaines ou lorsqu'elle est sale. Sécher complètement avant utilisation.
- Vérifiez l'irritation des pieds de votre enfant chaque fois que vous enfiler la Sock. Ne PAS appliquer sur un pied présentant une irritation cutanée.

## Que faire si la peau est irritée ?

- Arrêtez d'utiliser la Sock sur le pied touché et utilisez-la uniquement sur l'autre pied jusqu'à la disparition complète de l'irritation.
- Si l'irritation ne disparaît pas dans les 8 heures, contactez votre médecin pour déterminer si un oxymètre de pouls de secours est nécessaire.
- Contactez le service clientèle Owlet pour obtenir une aide individuelle afin d'éviter les marques rouges.
- Inspectez la peau sous la Sock du pied non affecté toutes les 4 heures pour vous assurer que l'irritation ne se reproduise pas.
- Si une irritation apparaît sur les deux pieds, arrêtez l'utilisation et consultez votre professionnel de santé.  
Enfiler à nouveau la Sock sur une peau irritée peut causer des dommages accrus à la peau.



# Nettoyer la Sock



Prendre soin de votre Sock en tissu, de votre capteur et de votre station de base permettra à votre Dream Sock de durer plus longtemps et d'être plus confortable pour votre bébé. Nous recommandons de laver la Sock et le capteur au moins toutes les deux semaines et de laver la station de base au moins tous les 30 jours. Vous devrez peut-être les laver plus souvent s'ils deviennent sales ou souillés.

Veuillez vous référer à la section 8 du manuel d'utilisation : Nettoyage, pour des instructions de nettoyage détaillées.

# Trouver un logement pour la station de base

Une fois que vous avez configuré l'application, vous devrez placer la station de base dans un lieu idéal dans votre domicile. L'emplacement de la station de base au sein du domicile est essentiel au bon fonctionnement et à la sécurité. Utilisez le guide ci-dessous pour déterminer le meilleur endroit pour votre station de base.

## Placer votre station de base

- Le meilleur emplacement n'est peut-être PAS la chambre de votre enfant, selon votre maison. Et vous devrez peut-être déplacer la station de base pendant la journée pour pouvoir toujours l'entendre.
- La station de base est la principale source de toutes les notifications, tant sonores que visuelles. Elle doit être située de manière à ce que le soignant puisse entendre les notifications en cas de bruit de fond ou de distractions. Déplacez-la pendant la journée si nécessaire.
- La station de base doit être située de façon à réveiller les soignants pendant les notifications. Les lumières de la station de base s'atténueront automatiquement dans les pièces les plus sombres.
- La station de base doit être à portée de votre réseau Wi-Fi domestique.
- Dans la plupart des cas, le capteur et la station de base doivent simplement se trouver dans la même maison (à moins de 100 pieds ou 30 m l'un de l'autre) pour qu'ils puissent communiquer. Mais la taille et la disposition de la maison peuvent affecter la force du signal, ce qui nécessite de placer la station de base plus près du capteur.

Gardez la station de base et le cordon éloignés du berceau et hors de portée de votre enfant pour réduire les risques d'étranglement par cordon.



### ATTENTION.

Ne placez **PAS** la station de base dans une position qui pourrait la faire tomber sur l'enfant. Des blessures pourraient survenir.

## Indicateur de portée Bluetooth (dans l'application)

- Indique la qualité de la connexion Bluetooth du capteur à la station de base.
- **Pour améliorer la connexion du capteur, rapprochez la station de base du bébé.**

## Recommandé



Bon




Correct



Mauvais



Déconnecté

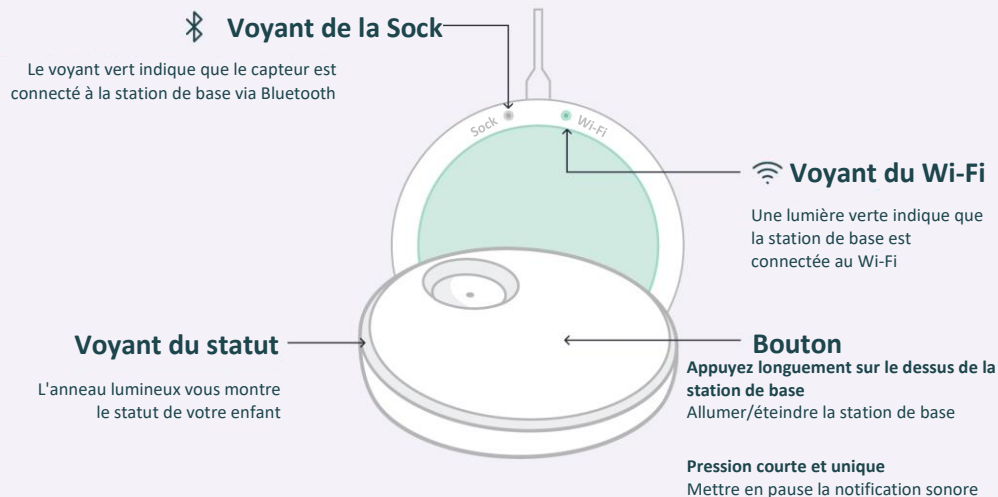

# Lorsque vous ne l'utilisez pas : désactivez la surveillance et chargez le capteur




Placez le capteur sur la station de base pour arrêter d'utiliser l'appareil et charger le capteur. Cela désactive également toutes les notifications jusqu'à ce que le capteur soit retiré de la station de base.

La station de base clignote en blanc pendant que le capteur est en charge et passe au blanc fixe lorsque le capteur est complètement chargé. Le capteur se charge complètement en 90 minutes et atteint 8 heures d'utilisation en 20 minutes.

Vous pouvez également appuyer et maintenir la station de base jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que la lumière s'éteigne (indiquant que la surveillance est désactivée). Aucune notification ne retentira même si le capteur est sur le bébé. Un appui rapide rallumera la station de base et reprendra la surveillance.



Ou utilisez le bouton Base dans l'application.

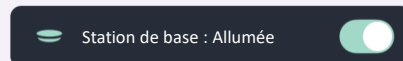

## Mode de récupération

Lorsque la station de base est éteinte, une session de surveillance démarre automatiquement après 20 minutes, si 4 minutes de lectures consécutives sont détectées.

Le mode de récupération peut être désactivé à l'aide du hub de contrôle de la Sock dans l'écran d'accueil de l'application et sera automatiquement activé une fois la prochaine session de la Sock commencée.

Une notification directe sera envoyée si le mode de récupération ne peut pas être activé.

| Indicateur de la station de base                                                                                                       | Statut                                    | Signification (condition de notification)                                                                                                                                                                       | Ce que vous devriez faire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Rouge clignotant</b><br><b>Haute priorité</b>   | <b>Fréquence cardiaque faible</b>         | Fréquence cardiaque inférieure à 50 BPM                                                                                                                                                                         | <p>Vérifiez immédiatement l'état de votre bébé et s'il va bien. Examinez la respiration, la couleur de la peau (est-elle bleue ou pâle ?), l'activité et la vigilance de votre bébé. Si vous avez des préoccupations concernant l'état de votre bébé, veuillez consulter un médecin.</p>                                                                                                              |
|                                                                                                                                        | <b>Fréquence cardiaque élevée</b>         | Fréquence cardiaque supérieure à 220 BPM                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                        | <b>Oxygène faible</b>                     | Taux d'oxygène inférieur à 80 %                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <br><b>Jaune clignotant</b><br><b>Priorité moyenne</b> | <b>Difficulté à recevoir les lectures</b> | Le capteur peut être mal placé et incapable de fournir des données valides au cours des 90 dernières secondes sans mouvement, OU il n'y a eu aucune donnée depuis 240 secondes et il y a un mouvement excessif. | <p>Vérifiez l'emplacement du capteur et assurez-vous que le bébé ne bouge pas ou n'est pas déplacé de manière excessive (c'est-à-dire ne se balance pas ou n'est pas porté). Cela peut prendre 10 à 20 secondes pour que cette notification disparaisse une fois que le capteur est repositionné ET que le bébé cesse de bouger. Désactivez la surveillance jusqu'à ce que le mouvement s'arrête.</p> |
|                                                                                                                                        | <b>Perte d'alimentation</b>               | La station de base a perdu l'alimentation secteur et est alimentée par batterie de secours.                                                                                                                     | <p>Vérifiez les connexions et rétablissez l'alimentation ou arrêtez l'utilisation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                        | <b>Problème de connexion</b>              | Le capteur a été déconnecté de la station de base pendant 60 secondes, car il est hors de portée de la station de base, a perdu l'alimentation ou présente un problème interne.                                 | <p>Rapprochez la station de base du capteur ou assurez-vous que rien ne bloque le signal entre les deux. Vérifiez le niveau de la batterie du capteur dans l'application.</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| <br><b>Bleu fixe</b><br><b>Priorité basse</b>          | <b>Batterie du capteur faible</b>         | Il reste 50 minutes ou moins d'autonomie de batterie au capteur.                                                                                                                                                | <p>Placez bientôt le capteur sur le chargeur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <br><b>Notification lavande clignotante</b>            | <b>Aide au sommeil</b>                    | Votre bébé bouge excessivement ou bouge depuis longtemps.                                                                                                                                                       | <p>Vérifiez l'état de votre bébé, il aura peut-être besoin de votre aide pour se rendormir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Indicateur de la station de base | Signification (condition de statut) |
|----------------------------------|-------------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------------|



**Lumière verte s'allumant  
par impulsions**

Le capteur est connecté à la station de base et reçoit des lectures



**Vert réflecteur rapide**

Le capteur obtient les premières lectures ou le bébé bouge. Les lectures ne s'afficheront pas dans l'application lors de mouvements importants.



**Blanc uni**

Le chargement du capteur sur la station de base est complètement terminé



**Lumière blanche s'allumant  
par impulsions**

Le capteur de la station de base est en charge



**Blanc clignotant**

Le chargement du capteur sur la station de base n'est pas couplé à la station de base



Le chargement du capteur sur la station de base est couplé à une autre station de base

# Notifications de santé

Affichez la fréquence cardiaque et le taux de saturation en oxygène en direct pendant une session de sommeil et recevez des notifications si la fréquence cardiaque ou la saturation en oxygène quittent les plages prédéfinies.


## Plages de fréquence cardiaque

La notification se déclenchera lorsque la fréquence cardiaque de votre bébé sera de :



## Plages de saturation en oxygène

La notification se déclenchera lorsque la saturation en oxygène de votre bébé sera de :

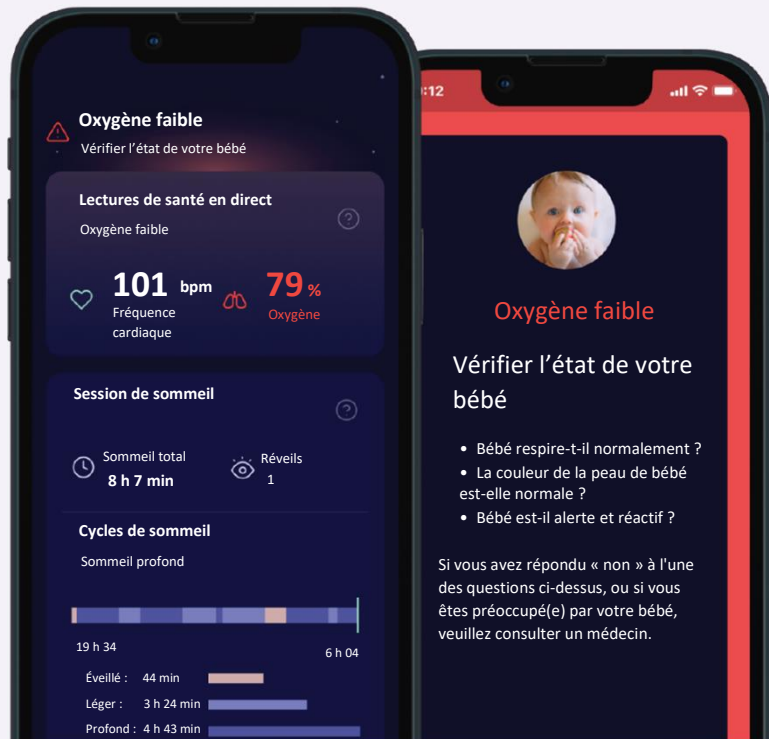


# Comment activer les notifications de santé

Activez les notifications de santé dans les paramètres de l'appareil.

## Activation des notifications de santé

Pour activer les notifications de santé, accédez aux paramètres Sock à partir de l'onglet Compte.

Activez ensuite les notifications de santé et effectuez l'apprentissage obligatoire. Vous devrez tester le son de notification rouge pour terminer la formation.

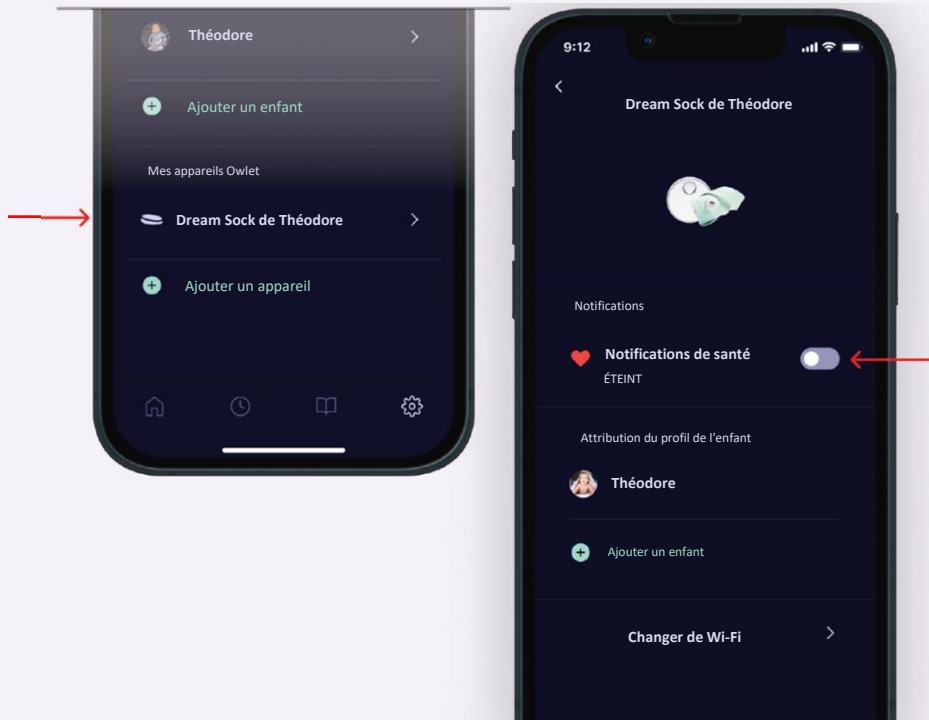

# Plages normales pour les lectures en direct

Lorsque vous recevez une notification rouge, la toute première chose à faire est de vérifier si votre enfant va bien. Examinez la respiration, la couleur de la peau (est-elle bleue ou pâle ?), l'activité et la vigilance de votre enfant. Si vous avez des préoccupations concernant l'état de votre enfant, veuillez consulter un médecin.

Pour plus d'informations sur les résultats de santé normaux, voir la section 7.2 du manuel d'utilisation de Dream Sock.

## Pouls

Une fois les notifications de santé activées, l'application affichera une valeur en direct de la fréquence cardiaque de votre enfant. Il est normal que votre enfant ait une fréquence cardiaque plus faible lorsqu'il dort que lorsqu'il est éveillé. Il est également normal que votre enfant présente des variations tout au long de la session, lorsqu'il se réveille et s'endort, se tourne et se retourne ou pleure. Rendez-vous sur [healthychildren.org](https://healthychildren.org) pour plus d'informations ou consultez votre médecin en cas de problème.

| Âge          | Fréquence cardiaque normale pendant le sommeil | Fréquence cardiaque normale au réveil |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 0-3 mois     | 90-160 BPM                                     | 100-205 BPM                           |
| 4 à 12 mois  | 90-160 BPM                                     | 100-180 BPM                           |
| 12 à 18 mois | 80-120 BPM                                     | 98-140 BPM                            |

## Saturation en oxygène

Il est normal que la saturation en oxygène de votre enfant diminue lorsqu'il dort, voire fluctue pendant le sommeil selon sa position ou sa phase de sommeil. Un taux de saturation en oxygène normal est supérieur à 90 % ; toutefois, il peut arriver que votre enfant descende en dessous de 90 % de temps en temps. En cas de lectures prolongées ou fréquentes valeurs inférieures à 90 %, allez voir votre enfant, vous devriez peut-être consulter son médecin.

| Âge             | Saturation en oxygène normale |
|-----------------|-------------------------------|
| 0 mois -18 mois | 90-100 %                      |

Si vous pensez que la notification de santé a été envoyée par erreur, elle a potentiellement été causée par l'un des éléments suivants :

- Placement de la Sock
- Mouvement ou pleurs
- Alimentation/rots
- Pieds froids

# Guide de dépannage

Utilisez le guide de dépannage suivant pour résoudre les problèmes liés à la configuration, à la connexion et au fonctionnement. Pour plus d'informations sur les notifications de dépannage, y compris les notifications techniques, consultez la page précédente.

| Problème                                                                         | Causes possibles                                                                                    | Actions                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impossible de voir le Wi-Fi Owlet pendant la configuration                       | La station de base n'est pas allumée                                                                | Branchez la station de base                                                                                                                                                                    |
|                                                                                  | Déjà connecté à un réseau Wi-Fi                                                                     | Vérifiez si le voyant Wi-Fi vert situé au bas de la station de base est allumé. Si tel est le cas, vous pouvez ignorer cette étape et continuer de configurer votre compte dans l'application. |
| Impossible de voir le Wi-Fi de votre domicile dans l'application Owlet           | Votre routeur domestique est de 5,0 GHz (Owlet ne prend en charge que 2,4 GHz)                      | Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à un réseau 2,4 GHz (la plupart des routeurs 5,0 GHz prennent également en charge 2,4 GHz)                                                 |
| La station de base ne se connecte pas à votre réseau Wi-Fi                       | Le mot de passe est incorrect                                                                       | Vérifiez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi                                                                                                                                                 |
|                                                                                  | La station de base est hors de portée de votre routeur Wi-Fi                                        | Rapprochez la station de base de votre routeur Wi-Fi pour la configuration                                                                                                                     |
|                                                                                  | Votre Wi-Fi ne fonctionne pas                                                                       | Essayez de redémarrer votre appareil mobile et de vous reconnecter à votre réseau Wi-Fi ou de réinitialiser votre routeur Wi-Fi.                                                               |
|                                                                                  | Le Wi-Fi nécessite une authentification via un navigateur ou comporte des restrictions de pare-feu. | Essayez un autre réseau.                                                                                                                                                                       |
|                                                                                  | Votre routeur domestique est de 5,0 GHz (Owlet ne prend en charge que 2,4 GHz)                      | Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à un réseau 2,4 GHz (la plupart des routeurs 5,0 GHz prennent également en charge 2,4 GHz)                                                 |
| Impossible de se connecter à l'application                                       | Mot de passe oublié                                                                                 | Réinitialisez votre mot de passe. Voir la section 10.2 du mode d'emploi.                                                                                                                       |
| Le capteur ne se connecte pas à la station de base                               | Le capteur est hors de portée de la station de base                                                 | Déplacez la station de base vers un autre emplacement.                                                                                                                                         |
|                                                                                  | D'autres appareils interfèrent avec le capteur.                                                     | Déplacez les autres appareils électroniques à proximité du capteur ou de la station de base ou déplacez la station de base.                                                                    |
| La station de base ne s'enregistre pas avec votre compte d'application Owlet iOS | La station de base et votre appareil mobile ne sont pas connectés au même réseau Wi-Fi              | Vérifiez que votre appareil mobile est connecté au même réseau Wi-Fi que la station de base                                                                                                    |
|                                                                                  | La station de base est déconnectée du Wi-Fi.                                                        | Vérifiez le voyant Wi-Fi vert au bas de la station de base. Il devrait être allumé. Sinon, essayez de reconnecter la station de base au réseau Wi-Fi.                                          |

| Problème                                                                        | Causes possibles                                                      | Actions                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La station de base est déconnectée d'Internet.                                  | La station de base est hors de portée de votre routeur Wi-Fi.         | Rapprochez la station de base et le routeur Wi-Fi. (REMARQUE : ni les prolongateurs de portée Wi-Fi ni les seconds routeurs ne seront utiles.) |
|                                                                                 | Le Wi-Fi de votre domicile ne fonctionne pas.                         | Réinitialisez votre routeur Wi-Fi                                                                                                              |
| Réinitialisation de l'application et demande de configurer à nouveau le système | La station de base a été enregistrée sur un autre compte utilisateur. | La station de base ne peut être enregistrée que sur un seul compte à la fois. Utilisez un seul compte pour tous les soignants.                 |
|                                                                                 | Un autre compte a été utilisé lors de la connexion.                   | Déconnectez-vous de l'application et connectez-vous avec le bon compte.                                                                        |
| Impossible de se déconnecter de l'application                                   | La configuration est incomplète                                       | Terminez l'installation ou la désinstallation, puis réinstallez l'application.                                                                 |

**Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections suivantes du manuel d'utilisation :**

| SECTION | TITRE DE LA SECTION      | SECTION | TITRE DE LA SECTION                |
|---------|--------------------------|---------|------------------------------------|
| 1       | Informations générales   | 5       | Configuration                      |
| 1.1     | Opérateur économique     | 7       | Utiliser l'application Owlet Dream |
| 2       | Informations de sécurité | 6.3     | Notifications et indicateurs       |
| 4.3     | Station de base          | 8       | Nettoyage de la Sock et du capteur |
| 4.4     | Capteur                  | 11      | Dépannage                          |
| 4.5     | Sock                     | 12      | Informations techniques            |

## Besoin d'aide ?

Contactez le service clientèle d'Owlet Baby Care, Owlet Baby Care, Inc.  
 3300 N Ashton Blvd., Suite 300  
 Lehi, UT 84043 États-Unis  
[www.owletcare.com](http://www.owletcare.com)