



# Iba stručná príručka pre ponožku

Na úvodné nastavenie

Zákaznícky servis Owlet Baby Care  
Bezplatná linka: +1 (844) 334-5330  
E-mail: [contact@owletcare.com](mailto:contact@owletcare.com)  
<https://support.owletcare.com/hc/en-us>

Dátum vydania: 22. 1. 2024

QRG-19.0316 Rev 3





**VAROVANIE!** Prístroj a príslušenstvo vždy uchovávajte mimo dosahu detí. Malé časti vrátane snímača a káblov predstavujú potenciálne nebezpečenstvo udusenía. **Umiestnite základňu aspoň 1 meter od postieľky, pretože kábel môže predstavovať nebezpečenstvo uškrtenia.**

---



**VAROVANIE!** Aplikácia pre mobilné zariadenia nie je určená ako primárny zdroj upozornení. Primárnym zdrojom upozornení je základňa. Základňu majte vždy v dosahu sluchu. Zabezpečte, aby ste základňu počuli napriek zvukom okolia (napríklad: hluk strojov alebo televízorov). Uistite sa, že základňa nie je zakrytá, pretože by to mohlo stlmiť zvuku alarmu.

---



**SPRÁVNE POUŽÍVANIE NAŠICH PRODUKTOV A STAROSTLIVOSŤ O VAŠE DIEŤA VYŽADUJE, ABY STE: OKAMŽITE REAGOVALI, KEĎ**

---



**VAROVANIE!** PONOŽKA OWLET DREAM SOCK NIE JE NÁHRADOU ZA DOHĽAD DOSPELÝCH, DOBRÉ RODIČOVSKÉ POSTUPY ANI POSTUPY BEZPEČNÉHO SPÁNKU.

---



Ponožka Dream Sock nie je určená na použitie u detí/dojčiat so zdravotnými problémami. Ak má dieťa zdravotné problémy, poraďte sa so svojím lekárom, aby ste zistili, či je ponožka Owlet Dream Sock pre vaše dieťa vhodná.

---



Ponožka Owlet Dream Sock so zdravotnými upozoreniami je určená len pre deti vo veku od 0 do 18 mesiacov s

# Začíname

## Stiahnite si



Na nastavenie novej ponožky Dream Sock použite

Po stiahnutí postupujte podľa krokov nastavenia v aplikácii, aplikácia vás bude sprevádzať cez:

- ✓ Vytvorenie účtu
- ✓ Potvrdenie účtu
- ✓ Nastavenie zariadenia
- ✓ Pripájanie k sieti Wi-Fi
- ✓ Registrácia základne
- ✓ Párovanie ponožky
- ✓ Vytvorenie profilu dieťaťa
- ✓ Čo sa musíte naučiť

## Je ponožka Owlet Dream Sock vhodná pre vás a vaše

0-18 mesiacov

2,5 kg - 13,6 kg

- Na použitie u detí vo veku od **0 do 18 mesiacov** s hmotnosťou **2,5 kg až 13,6 kg**.
- Nie je náhradou za dohľad opatrovateľa.

## Prehľad pomôcky

Ponožka drží senzor na nôžke dieťaťa. Senzor zhromažďuje údaje dieťaťa a odosiela ich do základne, ktorá ich odošle do vášho inteligentného zariadenia.



**Veľkosť ponožky 1 a 2**  
pravá a ľavá ponožka pre každú veľkosť



**Senzor**



**Základňa**



**USB napájací kábel a zástrčka**



**Nabíjačka**



**Sprievodca rýchlym**



**Aplikácia Dream**

# Veľkosť, priliehavosť a umiestnenie ponožiek


Pre správny výkon ponožiek Dream Sock je nevyhnutá ich správna

## 1. Vyberte ponožku zo základne

Keď ponožku vyberiete z nabijacieho portu, základňa začne blikať nazeleno, čo znamená, že ponožka hľadá údaje dieťaťa. Je čas nasadiť ponožku dieťaťu na nohu.

## 2. Vyberte si z 2 veľkostí ponožiek

Každá škatuľa obsahuje 4 ponožky - 2 veľkosti pre ľavú aj pravú nohu. Pomocou nižšie uvedeného sprievodcu vyberte počiatočnú veľkosť ponožky podľa

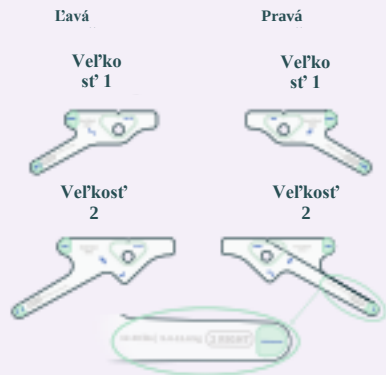

### UPOZORNE

Pravidelne kontrolujte, či ponožka dobre sedí. Skutočná veľkosť nohy dieťaťa sa môže líšiť od uvedených pokynov a deti rýchlo rastú. Prestaňte systém používať, keď vaše dieťa dosiahne hmotnosť **13,6 kg** alebo prerastie najväčšiu ponožku.

## 3. Vložte senzor (ak ešte nie je vložený)

Pripojte senzor k ponožke tak, že zarovnáte zárez na senzore so zárezom na ponožke. Natiahnite otvor v ponožke cez senzor.



## 4. Umiestnenie ponožky

Umiestnite ponožku na zodpovedajúce chodidlo (ľavé/pravé) tak, aby bol zárez na vonkajšej strane chodidla za malíčkom. Ponožka sa NESMIE dotýkať palcov na nohách. Slovo „TOP“ sa musí nachádzať na hornej časti chodidla v blízkosti palcov, nie na členku.



### UPOZORNE

Pri zapínaní nenaťahujte popruhy. Natiahnutie popruhov povedie k nadmernému utiahnutiu a zvýšenému riziku vzniku červených škvŕn alebo podráždenia pokožky.


## 5. Overte priliehavosť a umiestnenie



**VAROVANIE.** Nesprávna veľkosť ponožky a nesprávna starostlivosť

### Prirad'te ponožku k správnej nohe

Uistite sa, že používate ľavú ponožku pre ľavú nohu a pravú ponožku pre pravú nohu. Každá ponožka je označená nápisom „Right“ (Pravá) alebo „Left“ (Ľavá).

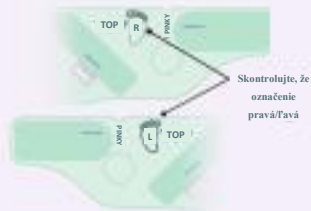

### Chráňte citlivé časti

- Uistite sa, že drsná časť upevňovacieho popruhu sa nedotýka pokožky.
- Ponožka nesmie presahovať cez palec.



## Skontrolujte

### Ponožka je príliš malá

Ak niektorý popruh prirodzene nedosiahne zapínanie, skúste väčšiu veľkosť ponožky. Popruhy NENAŤAHUJTE a ponožku príliš tesne neuťahujte, mohlo by to byť pre



### Ponožka je príliš veľká

Ak niektorý z popruhov presahuje zapínanie, vyskúšajte menšiu veľkosť ponožky. Ponožka a popruhy musia priliehať k nohe.



## Skontrolujte

Skontrolujte, či sú popruhy správne utiahnuté. Príliš ich NEUŤAHUJTE. Popruhy musia priliehať k pokožke, nesmú sa však do pokožky zarezávať. Pri zapínaní popruhy nenatiahujte - vedie to k ich nadmernému utiahnutiu.

## 6. Skontrolujte základňu

Skontrolujte základňu, keď má dieťa natiahnutú ponožku. Keď základňa jemne pulzuje nazeleno, znamená to, že údaje dieťaťa sa zachytávajú a sú normálne.

# Predchádzanie červeným škvrnám a podráždeniu pokožky

Nesprávne používanie ponožky môže spôsobiť nepohodlie, čo môže viesť k vzniku červených

## Predchádzanie

- Vyberte správnu veľkosť ponožky pre dieťa.
- Nenanášajte na pokožku pod ponožkou krémy alebo púdre. Udržujte pokožku čistú a suchú.
- Uistite sa, že ponožka je správne umiestnená a nastavená.
- Počas prvého týždňa používania a po zmene veľkosti ponožky kontrolujte pokožku každé 4 hodiny. Dočasné stopy po kontakte s ponožkou sú normálne, ak zmiznú do 8 hodín.
- Nohy striedajte aspoň každých 8 hodín.
- Ponožku a senzor perte v rukách každé 2 týždne, alebo keď sú špinavé. Pred použitím úplne vysušte.
- Pri každom použití ponožky skontrolujte, či nie sú chodidlá dieťaťa podráždené. NEAPLIKUJTE na nohu s podráždenou pokožkou.

## Čo robiť, ak je pokožka podráždená?

- Prestaňte natáhať ponožku na postihnuté chodidlo a kým podráždenie úplne nevymizne, dávajte ju iba na nepostihnuté chodidlo.
- Ak podráždenie nezmizne do 8 hodín, kontaktujte svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zistite, či by ste mali začať používať záložný pulzný oxymeter.
- Kontaktujte zákaznícku podporu Owlet a požiadajte o individuálnu pomoc, ako sa vyhnúť červeným škvrnám.
- Každé 4 hodiny skontrolujte pokožku pod ponožkou na nepostihnutej nohe, aby ste sa uistili, že sa podráždenie neopakuje.
- Ak sa na oboch nohách objaví podráždenie, prestaňte pomôcku používať a poraďte sa s lekárom. Opätovné natiehnutie ponožky na podráždenú pokožku môže spôsobiť ešte väčšie poranenie.



## Čistenie ponožky



Starostlivosť o textilnú ponožku, senzor a základňu zabezpečí, že ponožka Dream vydrží dlhšie a bude pre dieťa pohodlnejšia. Odporúčame prať ponožku a umývať senzor aspoň každé dva týždne a základňu aspoň každých 30 dní. Možno ich budete musieť čistiť častejšie, ak sa zašpinia alebo zaprášia.

Pozrite si časť 8 používateľskej príručky: Čistenie, kde nájdete podrobné pokyny na čistenie.

# Kde nájsť miesto pre základňu

Po nastavení aplikácie bude potrebné nájsť ideálne miesto pre základňu vo vašej domácnosti. Umiestnenie základne v domácnosti je nevyhnutné pre jej správny výkon a bezpečnosť. Pomocou nižšie uvedeného sprievodcu nájdite to najlepšie miesto pre základňu.

## Umiestnenie základne

- Závisí to od vášho domova, detská izba však NEMUSÍ byť tým najlepším miestom. Možno budete musieť základňu počas dňa presúvať, aby ste ju vždy počuli.
- Základňa je hlavným zdrojom všetkých upozornení, zvukových aj vizuálnych. Musí byť umiestnená tak, aby opatrovateľ počul upozornenia aj napriek iným zvukom okolia aj cez rušivé prvky. V prípade potreby ju počas dňa premiestnite.
- Základňa však musí byť umiestnená tak, aby počas upozornení prebúdila opatrovateľov. V tmavších miestnostiach sa svetlá základne automaticky stlmia.
- Základňa musí byť v dosahu vašej domácej siete Wi-Fi.
- Vo väčšine prípadov stačí, aby senzor a základňa boli v rovnakom dome 30 m od seba, aby mohli navzájom komunikovať. Veľkosť a usporiadanie domu však môžu ovplyvniť silu signálu, čo si vyžaduje, aby bola základňa umiestnená bližšie k senzoru.

Udržujte základňu a kábel mimo postieľky a mimo dosahu dieťaťa, aby ste znížili riziko úškrtu káblom.



### UPOZORNE

**NEUMIESTŇUJTE** základňu do žiadnej polohy, v ktorej by mohlo hroziť, že spadne na dieťa. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

## Indikátor dosahu Bluetooth (v aplikácii)

- Označuje kvalitu pripojenia senzora Bluetooth k základni.
- Ak chcete zlepšiť pripojenie snímača, presuňte základňu bližšie k dieťaťu.

## Odporúčané



Dobre




OK



Slabé



Odpojené

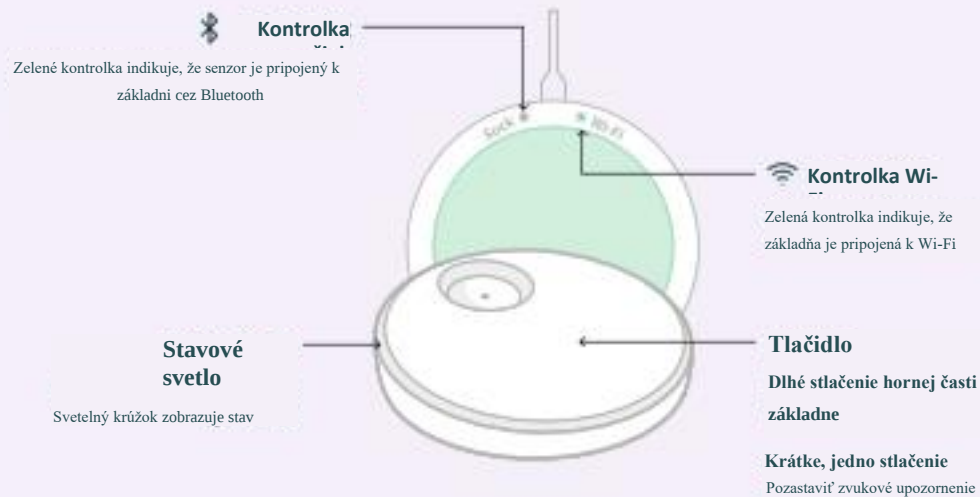

## Keď sa pomôcka nepoužíva - vypnite monitorovanie a nabite senzor



Umiestnite senzor na základňu, aby sa prestala pomôcka používať a nabil sa senzor. Tým sa tiež vypnú všetky upozornenia, kým sa senzor neodstráni zo základne.

Základňa bude počas nabíjania senzora pulzovať nabiele a po úplnom nabití senzora sa zmení na bielu. Senzor sa plne nabije za 90 minút a na 8 hodín používania sa nabije za 20 minút.

Prípadne stlačte a podržte základňu, kým nezačujete cvrlikanie a nezhasne svetlo (monitorovanie je vypnuté). Neozvú sa žiadne upozornenia, aj keď je senzor na dieťať. Rýchlym klepnutím sa základňa znova zapne a obnoví sa monitorovanie.



**STLAČ**

Alebo použite prepínač Base (Základňa) v



### Režim obnovenia

Keď je základňa vypnutá, monitorovacia relácia sa začne automaticky po 20 minútach, ak sa zaznamenajú 4 minúty po sebe idúcich meraní.

Režim obnovenia je možné deaktivovať pomocou ovládacieho centra Sock na domovskej obrazovke aplikácie a automaticky sa aktivuje, keď začne ďalšia relácia Sock.

Ak nie je možné zapnúť režim obnovenia, odošle sa push notifikácia.

| Indikátor základne                                                                                                                   | Stav                          | Význam (stav upozornenia)                                                                                                                                                                   | Čo je potrebné urobiť                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Blikajúca červená</b>                         | Nízka pulzová                 | Pulz pod 50 úderov/min.                                                                                                                                                                     | <p>Okamžite skontrolujte dieťa a zistite, či je v poriadku. Skontrolujte dýchanie dieťaťa, farbu jeho pokožky (či je modré alebo bledé), aktivitu a bdelosť. Ak sa obávate, že vaše dieťa nie je v poriadku, vyhľadajte lekársku pomoc.</p>                                                                |
|                                                                                                                                      | Vysoká pulzová                | Pulz nad 220 úderov/min.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                      | Nízka hladina                 | Kyslík pod 80 %                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <br><b>Blikajúca žltá</b><br><b>Stredná priorita</b> | Ťažkosti pri získavaní údajov | Snímač môže byť nesprávne umiestnený a nedokáže poskytnúť platné údaje za posledných 90 sekúnd bez pohybu, ALEBO neboli zaznamenané žiadne údaje za 240 sekúnd a došlo k nadmernému pohybu. | <p>Skontrolujte umiestnenie senzora a uistite sa, že sa dieťa nekrúti alebo sa nadmerne nepohybuje (t. j. hojdá sa alebo ho niekto nosí). Po zmene polohy senzora A keď sa dieťa prestane pohybovať, môže 10 až 20 sekúnd, kým toto upozornenie zmizne. Vypnite monitorovanie, kým sa pohyb nezastaví.</p> |
|                                                                                                                                      | Strata                        | Základňa stratila napájanie a funguje zo záložnej batérie.                                                                                                                                  | Skontrolujte pripojenia a obnovte napájanie alebo                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                      | Problém s                     | Senzor bol na 60 sekúnd odpojený od základne, pretože je mimo dosahu základne, stratil energiu alebo má interný problém.                                                                    | Presuňte základňu bližšie k senzoru alebo sa uistite, že signál medzi nimi nie je ničím blokovaný. V aplikácii skontrolujte úroveň nabitia batérie senzora.                                                                                                                                                |
| <br><b>Nepreušovaná modrá Nízka</b>                  | Slabá batéria senzora         | Senzor má do vybitia batérie 50 minút alebo menej.                                                                                                                                          | Čím skôr umiestnite senzor na nabíjačku.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <br><b>Blikajúce upozornenie levanduľovej farby</b>  | Spánkový                      | Dieťa sa nadmerne pohybuje alebo sa už dlhší čas pohybuje.                                                                                                                                  | Skontrolujte dieťa, možno bude potrebovať pomoc pri zaspávaní.                                                                                                                                                                                                                                             |


| Indikátor základne                                                                                                 | Význam (stav)                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Pulzujúca zelená</b>        | Senzor je pripojený k základni a prijíma údaje                                                                         |
| <br><b>Rýchlo blikajúca zelená</b> | Senzor získava počiatočné údaje alebo sa dieťa pohybuje.<br>Počas nadmerného pohybu sa v aplikácii nezobrazia hodnoty. |
| <br><b>Nepreerušova</b>            | Nabíjanie senzora na základni je úplne nabité                                                                          |
| <br><b>Pulzujúca biela</b>         | Senzor na základni sa nabíja                                                                                           |
| <br><b>Blikajúca biela</b>         | Nabíjanie senzora na základni nie je spárované so základňou                                                            |
|                                    | Nabíjanie senzora na základni je spárované s inou základňou                                                            |

# Zdravotné upozornenia

Zobrazenie aktuálnych hodnôt pulzovej frekvencie a saturácie kyslíkom počas spánku, ako aj upozornenia, ak pulzová frekvencia alebo saturácia kyslíkom prekročia prednastavené rozsahy.

## Rozsahy pulzovej frekvencie

Upozornenie sa spustí, keď je pulzová frekvencia dieťaťa:

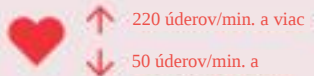

## Rozsahy saturácie kyslíkom

Upozornenie sa spustí, keď je saturácia kyslíka dieťaťa:




# Ako povoliť zdravotné upozornenia

Povoľte zdravotné upozornenia v nastaveniach pomôcky.

## Povolenie zdravotných upozornení

Ak chcete zapnúť upozornenia týkajúce sa zdravia, prejdite z nastavení ponožky

Potom prepnete na Zdravotné upozornenia a dokončíte požadované lekcie. Pred ukončením školenia budete musieť otestovať zvuk červeného upozornenia.

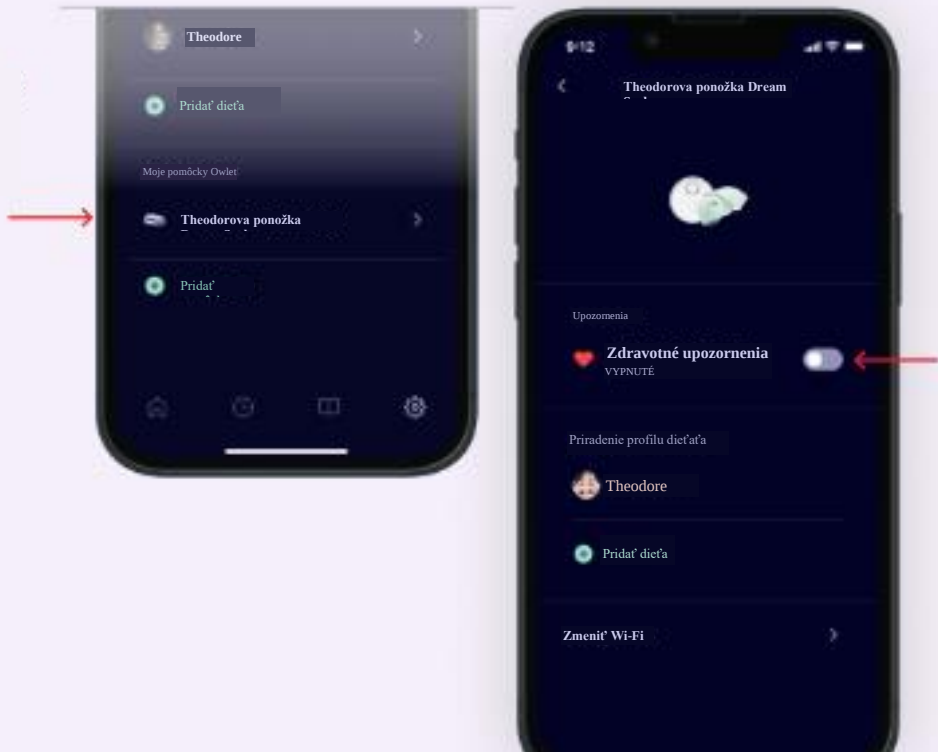

# Normálne rozsahy pre aktuálne hodnoty

Keď dostanete červené upozornenie, prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je skontrolovať dieťa a zistiť, či je v poriadku. Treba skontrolovať dýchanie dieťaťa, farbu jeho pokožky (je modré alebo bledé?), aktivitu a bdelosť. Ak máte obavy, že vaše dieťa nie je v poriadku, vyhľadajte lekársku pomoc.

Viac informácií o normálnych zdravotných údajoch nájdete v časti 7.2 v používateľskej príručke pre ponožku Dream Sock

## Pulzová frekvencia

Po aktivácii zdravotných upozornení zobrazí aplikácia aktuálnu hodnotu pulzovej frekvencie dieťaťa. Je normálne, že dieťa má počas spánku nižšiu pulzovú frekvenciu ako v bdelom stave. Je tiež normálne, že počas relácie hodnoty dieťaťa kolísu, pretože sa budí a zaspáva, prehadzuje sa a otáča alebo dokonca plače. Viac informácií nájdete na stránke [healthychildren.org](https://healthychildren.org). Ak máte akékoľvek obavy, navštívte svojho lekára.

| Vek     | Normálna spánková pulzová | Normálna pulzná frekvencia |
|---------|---------------------------|----------------------------|
| 0 - 3   | 90 - 160                  | 100 - 205                  |
| 4 - 12  | 90 - 160                  | 100 - 180                  |
| 12 - 18 | 80 - 120                  | 98 - 140                   |

## Saturácia kyslíkom

Je normálne, že saturácia kyslíkom u dieťaťa počas spánku klesá a dokonca počas spánku kolíše v závislosti od rôznych polôh a stavov spánku. Normálna úroveň saturácie kyslíkom je nad 90 %, môže sa však stať, že hodnota u dieťa z času na čas klesne pod 90 %. Pri dlhotrvajúcich alebo častých nameraných hodnotách pod 90 % dieťa skontrolujte, možno sa budete musieť poradiť s lekárom.

| Vek             | Normálne Saturácia kyslíkom |
|-----------------|-----------------------------|
| 0 mesiacov - 18 | 90 % -                      |

Ák sa domnievate, že zdravotné upozornenie bolo odoslané omylom, mohlo to byť spôsobené jedným z nasledujúcich dôvodov:

- Umiestnenie ponožky
- Pohyb alebo plač
- Kŕmenie/grganie

# Spríevodca riešením problémov

Na vyriešenie problémov súvisiacich s nastavením, pripojením a prevádzkou použite nasledujúcu príručku na riešenie problémov. Informácie o upozorneniach na riešenie problémov vrátane technických upozornení nájdete na predchádzajúcej strane.

| Problém                                                      | Možné príčiny                                                              | Akcie                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Počas nastavovania sa nezobrazuje Wi-Fi Owlet                | Základňa nie je zapnutá                                                    | Zapojte základňu                                                                                                                                            |
|                                                              | Už je pripojená k sieti Wi-Fi                                              | Skontrolujte, či na spodnej strane základne svieti zelená kontrolka Wi-Fi. Ak áno, môžete tento krok preskočiť a pokračovať v nastavovaní účtu v aplikácii. |
| V aplikácii Owlet sa nezobrazuje vaše domáce Wi-Fi           | Váš domáci router je 5,0 GHz (Owlet podporuje iba 2,4 GHz)                 | Uistite sa, že je vaše mobilné zariadenie pripojené k 2,4 GHz sieti (väčšina 5,0 GHz routerov podporuje aj 2,4 GHz)                                         |
| Základňa sa nepripoí k vašej sieti Wi-Fi                     | Heslo je nesprávne                                                         | Dvakrát skontrolujte heslo siete Wi-Fi                                                                                                                      |
|                                                              | Základňa je mimo dosahu vášho routera Wi-Fi                                | Na nastavenie presuňte základňu bližšie k routeru Wi-Fi                                                                                                     |
|                                                              | Vaša sieť Wi-Fi nefunguje                                                  | Skúste reštartovať mobilné zariadenie a znova sa pripojiť k sieti Wi-Fi alebo resetovať router Wi-Fi.                                                       |
|                                                              | Wi-Fi vyžaduje overenie cez prehliadač alebo má obmedzenia brány firewall. | Skúste inú sieť.                                                                                                                                            |
|                                                              | Váš domáci router je 5,0 GHz (Owlet podporuje iba 2,4 GHz)                 | Uistite sa, že je vaše mobilné zariadenie pripojené k 2,4 GHz sieti (väčšina 5,0 GHz routerov podporuje aj 2,4 GHz)                                         |
| Nedá sa prihlásiť do aplikácie                               | Zabudli ste heslo                                                          | Obnovte heslo. Pozrite si časť 10.2 v návode na použitie.                                                                                                   |
| Senzor sa nepripoí k základni                                | Senzor je mimo dosahu základne                                             | Presuňte základňu na iné miesto.                                                                                                                            |
|                                                              | Senzor rušia iné zariadenia.                                               | Odstráňte inú elektroniku v blízkosti senzora alebo základne alebo preložte základňu na iné miesto.                                                         |
| Základňa sa nezaregistruje do vášho účtu aplikácie Owlet iOS | Základňa a vaše mobilné zariadenie nie sú v rovnakej sieti Wi-Fi           | Skontrolujte, či je vaše mobilné zariadenie pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako základňa                                                                   |
|                                                              | Základňa je odpojená od Wi-Fi.                                             | Skontrolujte, či na spodnej strane základne svieti zelená kontrolka Wi-Fi. Musí byť zapnutá. Ak nie, skúste znova pripojiť základňu k sieti Wi-Fi.          |

| Problém                                                    | Možné príčiny                                           | Akcie                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Základňa je odpojená od internetu.                         | Základňa je mimo dosahu vášho Wi-Fi routera.            | Posuňte základňu a router Wi-Fi bližšie k sebe. (POZNÁMKA: nepomôžu ani predlžovače dosahu Wi-Fi, ani druhé routery.) |
|                                                            | Vaša domáca sieť Wi-Fi nefunguje.                       | Resetujte váš Wi-Fi router                                                                                            |
| Obnovenie aplikácie a výzva na opätovné nastavenie systému | Základňa bola zaregistrovaná na iný používateľský účet. | Základňa môže byť súčasne zaregistrovaná iba na jeden účet. Použite jeden účet pre všetkých opatrovateľov.            |
|                                                            | Počas prihlásenia bol použitý iný účet.                 | Odhláste sa z aplikácie a prihláste sa pomocou správneho účtu.                                                        |
| Nedá sa odhlásiť z aplikácie                               | Nastavenie je neúplné                                   | Dokončite nastavenie alebo odinštalujte aplikáciu a potom ju znova nainštalujte.                                      |

Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich častiach používateľskej príručky:

Potrebuje

| ČASŤ | NÁZOV ČASTI             | ČASŤ | NÁZOV ČASTI                      |
|------|-------------------------|------|----------------------------------|
| 1    | Všeobecné informácie    | 5    | Nastavenie                       |
| 1.1  | Ekonomický operátor     | 7    | Používanie aplikácie Owlet Dream |
| 2    | Bezpečnostné informácie | 6.3  | Upozornenia a indikátory         |
| 4.3  | Základňa                | 8    | Čistenie ponožky a senzora       |
| 4.4  | Senzor                  | 11   | Riešenie problémov               |
| 4.5  | Ponožka                 | 12   | Technické informácie             |

Kontaktujte zákaznícky servis Owlet Baby Care  
Owlet Baby Care, Inc.  
3300 N Ashton Blvd, Suite 300  
Lehi, UT, 84043, USA  
[www.owletcare.com](http://www.owletcare.com)