



Doar referință rapidă Șosetă Dream

Utilizați aplicația pentru configurarea inițială

Serviciu Clienți Owlet Baby Care
Număr gratuit: +1 (844) 334-5330
E-mail: contact@owletcare.com
<https://support.owletcare.com/hc/en-us>

Data emiterii: 22-01-2024

QRG-19.0316 Rev 3



AVERTIZARE! Nu lăsați niciodată dispozitivul și accesoriile la îndemâna copiilor. Piesele mici, inclusiv senzorul și cablurile, sunt potențiale pericole de sufocare. Așezați stația de bază la cel puțin trei metri distanță de pătuț, cablul poate reprezenta un pericol de strangulare.



AVERTIZARE! Aplicația pentru dispozitivul mobil nu este destinată a fi tratată ca sursă principală de notificări. Stația de bază este sursa principală de notificări. Păstrați întotdeauna stația de bază în raza audibilă. Asigurați-vă că stația de bază poate fi auzită peste zgomotele ambientale (de exemplu: aparate zgomotoase sau televizoare). Asigurați-vă că stația de bază nu este acoperită, deoarece aceasta ar putea înăbuși sunetele de alarmă.



PENTRU A UTILIZA CORECT PRODUSELE NOASTRE ȘI PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI DVS.: RĂSPUNDEȚI PROMPT ORI DE CÂTE ORI ESTE EMISĂ O NOTIFICARE.



AVERTIZARE! OWLET DREAM SOCK NU ESTE UN ÎNLOCUITOR PENTRU SUPERVIZAREA DIN PARTEA ADULȚILOR, BUNELOR PRACTICI DE PARENTING SAU PRACTICILE DE SOMN SIGUR.



Șoseta Dream nu este indicată pentru utilizare la copiii/sugari cu probleme de sănătate. Pentru bebelușii cu afecțiuni de sănătate, vă rugăm să consultați medicul dvs. pentru a determina dacă Owlet Dream Sock este sau nu potrivit pentru copilul dvs.



Șoseta Owlet Dream cu notificări de sănătate este destinată pentru utilizare numai la bebelușii cu vârsta între 0 și 18 luni cu o greutate de 2,5-13,6 kg.

Noțiuni de bază

Descărcați aplicația



Utilizați aplicația Owlet Dream pentru a configura noua dvs. șosetă Dream

După descărcare, urmați pașii de configurare din aplicație, aplicația vă va ghida:

- ✓ Crearea unui cont
- ✓ Confirmarea contului
- ✓ Configurarea dispozitivului
- ✓ Conectarea la Wi-Fi
- ✓ Înregistrarea stației de bază
- ✓ Asociere șosetă
- ✓ Crearea unui profil de copil
- ✓ Învățare necesară

Este șoseta Owlet Dream potrivită pentru dvs. și bebelușul dvs.?

0-18 luni

2,5 - 13,6 kg

- Pentru utilizare la bebeluși cu vârsta de cel puțin **0-18 luni** și cântărind între **2,5-13,6 kg**.
- Nu este un înlocuitor pentru supravegherea de către îngrijitor.

Prezentare generală a dispozitivului

Șoseta ține senzorul pe piciorul bebelușului. Senzorul adună citirile bebelușului și le trimite la stația de bază, care le trimite pe dispozitivul dvs. inteligent.



Șosete mărimea 1 și 2
șosetă dreapta și stânga
pentru fiecare mărime



Senzor de șosetă



Stație de bază



Cablu de alimentare și
mufă USB



Adaptor de
alimentare



Ghid de inițiere rapidă



Aplicația Dream

Mărimea șosetei, potrivire și amplasare

Mărimea, potrivirea și amplasarea corespunzătoare a șosetei sunt esențiale pentru performanța Dream Sock.

1. Scoateți șoseta de pe stația de bază

Când scoateți șoseta de pe portul de încărcare, stația de bază va începe să lumineze verde intermitent, indicând faptul că șoseta caută citiri de la copilul dvs. Este timpul să puneți șoseta pe piciorul copilului dvs.

2. Alegeți dintre 2 mărimi de șosete

Fiecare cutie vine cu 4 șosete - 2 mărimi atât pentru piciorul stâng, cât și pentru cel drept. Utilizați ghidul de mai jos pentru a alege o dimensiune de pornire a șosetei în funcție de greutate. Apoi schimbați dimensiunea șosetei în funcție de mărimea reală.



PRECAUȚIE.

Verificați regulat potrivirea șosetei. Mărimea reală a piciorului bebelușului poate diferi de recomandările de mai sus, iar bebelușii cresc rapid. Nu mai utilizați sistemul când bebelușul atinge **13,6 kg** sau depășește cea mai mare șosetă.

3. Introduceți senzorul (dacă nu este deja introdus)

Atașați senzorul la șosetă aliniind creștătura de pe senzor cu creștătura de pe șosetă. Întindeți gaura din șosetă peste senzor.



4. Poziționarea șosetei

Așezați șoseta pe piciorul corespunzător (stâng/drept) cu creștătura din exteriorul piciorului în spatele degetului mic. Șoseta NU trebuie să atingă degetele de la picioare. Cuvântul „TOP” (SUS) trebuie plasat pe vârful piciorului, lângă degetele de la picioare și nu la gleznă.



PRECAUȚIE.

Nu întindeți curelele la fixare. Întinderea curelelor va duce la o strângere excesivă și un risc crescut de urme roșii sau iritare a pielii.


5. Verificați potrivirea și plasarea șosetei



AVERTIZARE Potrivirea sau îngrijirea necorespunzătoare a șosetei poate duce la rănirea pielii.

Potriviriți șoseta pe picior

Asigurați-vă că utilizați șoseta stângă pentru piciorul stâng și șoseta dreaptă pentru piciorul drept. Fiecare șosetă este marcată cu „R” (dreapta) sau „L” (stânga).

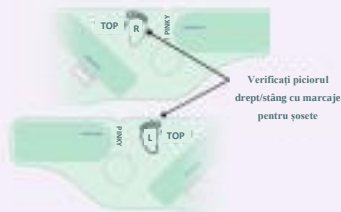

Protejați părțile sensibile


- Asigurați-vă că partea abrazivă a dispozitivului de fixare nu atinge pielea.
- Șoseta nu trebuie să se extindă peste degetele de la picioare.



Verificați dimensiunea șosetei

Șosetă prea mică

Dacă vreuna dintre curele nu ajunge în mod natural la dispozitivul de fixare, încercați o dimensiune mai mare a șosetei. NU întindeți curelele și nu strângeți șoseta prea strâns sau ar putea fi incomod pentru copilul dvs.

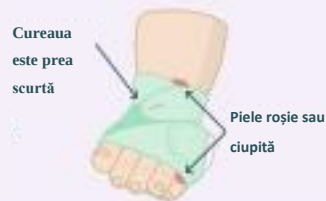

Șosetă prea mare

Dacă oricare dintre curele trece dincolo de dispozitivul de fixare, încercați o dimensiune mai mică a șosetei. Șoseta și curelele trebuie să fie bine fixate pe picior.



Verificați

Verificați dacă curelele sunt ajustate corect. NU strângeți prea mult. Curelele trebuie să se așeze plat pe piele, dar să nu apese pe piele. Nu întindeți curelele la fixare - acest lucru duce la strângerea excesivă.

6. Verificați stația de bază

Cu șoseta acum pe copil, verificați stația de bază. Odată ce pulsează ușor verde, înseamnă că citirile copilului dvs. sunt preluate și sunt normale.

Evitarea petelor roșii și iritarea pielii

Utilizarea incorectă a șosetei poate duce la disconfort, care poate duce la urme roșii, răni de presiune sau vezicule pe piciorul bebelușului.

Evitarea iritației pielii

- Alegeți dimensiunea corectă a șosetei pentru copilul dvs.
- Evitați să folosiți loțiuni sau pudre sub șosetă. Păstrați pielea curată și uscată.
- Asigurați-vă că șoseta este poziționată și ajustată corect.
- Verificați pielea la fiecare 4 ore în timpul primei săptămâni de utilizare și după schimbarea mărimii șosetei. Marcarea temporară de la contactul cu șosetele este normală dacă dispare în decurs de 8 ore.
- Alternați picioarele cel puțin la fiecare 8 ore.
- Spălați manual șosetele și senzorul la fiecare 2 săptămâni sau când sunt murdare. Uscați complet înainte de utilizare.
- Verificați picioarele copilului dvs. pentru iritații de fiecare dată când aplicați șoseta. NU aplicați pe un picior cu iritații ale pielii.

Ce trebuie să faceți dacă pielea este iritată?

- Întrerupeți utilizarea pe piciorul afectat și aplicați șoseta numai pe piciorul neafectat până când iritația se rezolvă complet.
- Dacă iritația nu se rezolvă în decurs de 8 ore, contactați furnizorul de servicii medicale pentru a determina dacă este necesar un pulsoximetru de rezervă.
- Contactați serviciul de asistență pentru clienți Owlet pentru ajutor individual cu evitarea semnelor roșii.
- Inspectați pielea de sub șosetă pe piciorul neafectat la fiecare 4 ore pentru a vă asigura că iritația nu reapare.
- Dacă apare iritație pe ambele picioare, întrerupeți utilizarea și consultați medicul dvs. Reaplicarea șosetei pe pielea iritată poate provoca leziuni crescute ale pielii.



Curățarea șosetei



Îngrijirea șosetei, a senzorului și a stației de bază din material textil va face ca șoseta Dream să dureze mai mult și să fie mai confortabilă pentru bebeluș. Vă recomandăm să spălați șoseta și senzorul cel puțin o dată la două săptămâni, iar stația de bază cel puțin la fiecare 30 de zile. Poate fi necesar să le spălați mai des dacă se murdăresc.

Vă rugăm să consultați manualul utilizatorului secțiunea 8: Curățare, pentru instrucțiuni detaliate de curățare.

Găsirea unui loc pentru stația de bază

După ce ați configurat aplicația, veți dori să plasați stația de bază într-o locație ideală din casa dvs. Locația stației de bază în casă este esențială pentru performanța și siguranța corespunzătoare. Utilizați ghidul de mai jos pentru a determina cel mai bun loc pentru stația dvs. de bază.

Plasarea stației de bază

- Este posibil ca cea mai bună locație să NU fie camera copilului dvs., în funcție de casa dvs. Și poate fi necesar să mutați stația de bază în timpul zilei, astfel încât să o puteți auzi întotdeauna.
- Stația de bază este sursa principală pentru toate notificările, atât sonore, cât și vizuale. Trebuie să fie amplasată astfel încât îngrijitorul să poată auzi notificările în cazul zgomotului de fundal sau a distragerii atenției. Mutați-o în timpul zilei dacă este necesar.
- Stația de bază trebuie să fie amplasată pentru a trezi îngrijitorii în timpul notificărilor. Luminile stației de bază se vor diminua automat în camerele mai întunecate.
- Stația de bază trebuie să se afle în raza de acțiune a rețelei Wi-Fi de acasă.
- În cele mai multe cazuri, senzorul și stația de bază trebuie doar să fie în aceeași casă (la o distanță de 100 ft. sau 30 m unul de celălalt) pentru a putea comunica. Dar dimensiunea și aranjamentul casei pot afecta puterea semnalului, necesitând ca stația de bază să fie plasată mai aproape de senzor.



PRECAUȚIE.


Țineți stația de bază și cablul departe de pătuț, astfel încât să nu fie la îndemâna copilului pentru a reduce pericolele de strangulare cu cablul.

NU așezați stația de bază în nicio poziție care ar putea provoca căderea pe copil. Se pot produce accidentări.

Indicator de rază Bluetooth (în aplicație)


- Indică calitatea conexiunii Bluetooth a senzorului la stația de bază.
- Pentru a îmbunătăți conexiunea senzorului, mutați stația de bază mai aproape de bebeluș.

Recomandat

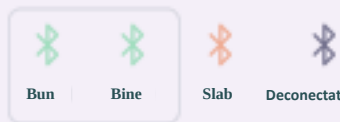


Lumină șosetă
Lumina verde indică faptul că senzorul este conectat la stația de bază prin Bluetooth

Lumină de stare
Inelul luminos vă arată starea copilului dvs.

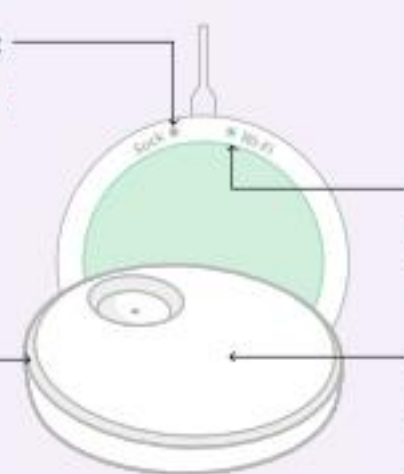


Lumină Wi-Fi
Lumina verde indică faptul că stația de bază este conectată la Wi-Fi

Buton
Apăsați lung partea de sus a stației de bază
Porniți/opriți stația de bază

Apăsare scurtă, unică
Întrerupeți notificarea sonoră

Când nu se utilizează - dezactivați monitorizarea și încărcați senzorul



Plasați senzorul pe stația de bază pentru a nu mai utiliza dispozitivul și a încărca senzorul. Acest lucru dezactivează, de asemenea, toate notificările până când senzorul este scos de pe stația de bază.


Stația de bază va pulsa în alb în timp ce senzorul se încarcă și va trece la alb continuu când senzorul este complet încărcat. Senzorul se încarcă complet în 90 de minute și se încarcă până la 8 ore de utilizare în 20 de minute.

Alternativ, apăsați și mențineți apăsată stația de bază până când auziți un ciripit și lumina se stinge (monitorizarea este oprită). Nicio notificare nu va suna chiar dacă senzorul este pe copil. O atingere rapidă va porni din nou stația de bază și va relua monitorizarea.



APĂSAȚI

Sau utilizați butonul de comutare de bază din aplicație.

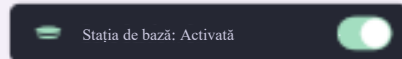

Mod de recuperare

Când stația de bază este oprită, o sesiune de monitorizare va începe automat după 20 de minute, dacă sunt detectate 4 minute de citiri consecutive.

Modul de recuperare poate fi dezactivat folosind centrul de control Sock din ecranul de pornire al aplicației și se va activa automat odată ce începe următoarea sesiune Sock.

O notificare push va fi trimisă dacă Modul de recuperare nu poate fi activat.

Indicatorul stației de bază	Stare	Semnificație (condiția de notificare)	Ce trebuie să faceți
 Roșu intermitent Prioritate ridicată	Frecvență a pulsului scăzută	Frecvența pulsului sub 50 BPM	Verificați-vă imediat copilul și vedeți dacă este bine. Lucrurile de verificat sunt respirația bebelușului, culoarea pielii (dacă este albastru sau palid), activitate și vigilență. Dacă aveți o îngrijorare că copilul dvs. nu este bine, vă rugăm să solicitați asistență medicală.
	Frecvență a pulsului ridicată	Frecvența pulsului peste 220 BPM	
	Oxygen scăzut	Oxygen sub 80%	
 Galben intermitent Prioritate medie	Dificultate de a obține citirile	Senzorul poate fi plasat incorect și nu poate furniza date valide pentru ultimele 90 de secunde fără mișcare, SAU nu au existat date timp de 240 de secunde și există mișcare excesivă.	Verificați amplasarea senzorului și asigurați-vă că bebelușul nu se mișcă sau nu este mișcat excesiv (adică este legănat sau ținut în brațe). Poate dura 10-20 de secunde pentru ca această notificare să se șteargă odată ce senzorul este re poziționat ȘI bebelușul nu se mai mișcă. Opiți monitorizarea până când mișcarea se oprește.
	Pierdere alimentării	Stația de bază a pierdut curentul și funcționează pe bateria de rezerva.	Verificați conexiunile și restabiliți alimentarea sau întrerupeți utilizarea.
	Problemă de conexiune	Senzorul a fost deconectat de la stația de bază timp de 60 de secunde deoarece este în afara razei de acoperire a stației de bază, a pierdut alimentarea cu energie sau are o problemă internă.	Mutați stația de bază mai aproape de senzor sau asigurați-vă că nu există nimic care să blocheze semnalul între cele două. Verificați nivelul bateriei senzorului în aplicație.
 Albastru continuu Prioritate scăzută	Baterie descărcată la senzor	Senzorul mai are 50 de minute sau mai puțin de viață a bateriei.	Puneți senzorul pe încărcător în curând.
 Notificare intermitentă Culoarea lavandei	Asistență pentru somn	Bebeluşul dvs. se mișcă excesiv sau se mișcă o perioadă lungă de timp.	Verificați-vă copilul, ar putea avea nevoie de ajutorul dvs. pentru a adormi.

Indicatorul stației de bază	Semnificație (condiție de stare)
 Verde pulsatoriu	Senzorul este conectat la stația de bază și primește citiri
 Verde intermitent rapid	Senzorul primește citiri inițiale sau copilul se mișcă. Citirile nu se vor afișa în aplicație în timpul mișcărilor mari.
 Alb continuu	Senzorul care se încarcă pe stația de bază este complet încărcat
 Alb pulsatoriu	Senzorul de pe stația de bază se încarcă
 Alb intermitent	Senzorul care se încarcă pe stația de bază nu este asociat cu stația de bază
	Senzorul care se încarcă pe stația de bază este asociat cu o stație de bază diferită

Notificări de sănătate

Afișează în timp real nivelurile de puls și de saturație de oxigen în timpul unei sesiuni de somn și primește notificări dacă pulsul sau saturația în oxigen părăsesc intervalele prestabilite

Intervalele de puls

Notificarea se va declanșa când pulsul bebelușului dvs. este:



220 BPM și mai ridicat




50 BPM și mai scăzut

Intervalele de saturație în oxigen

Notificarea se va declanșa atunci când saturația în



80% și mai jos

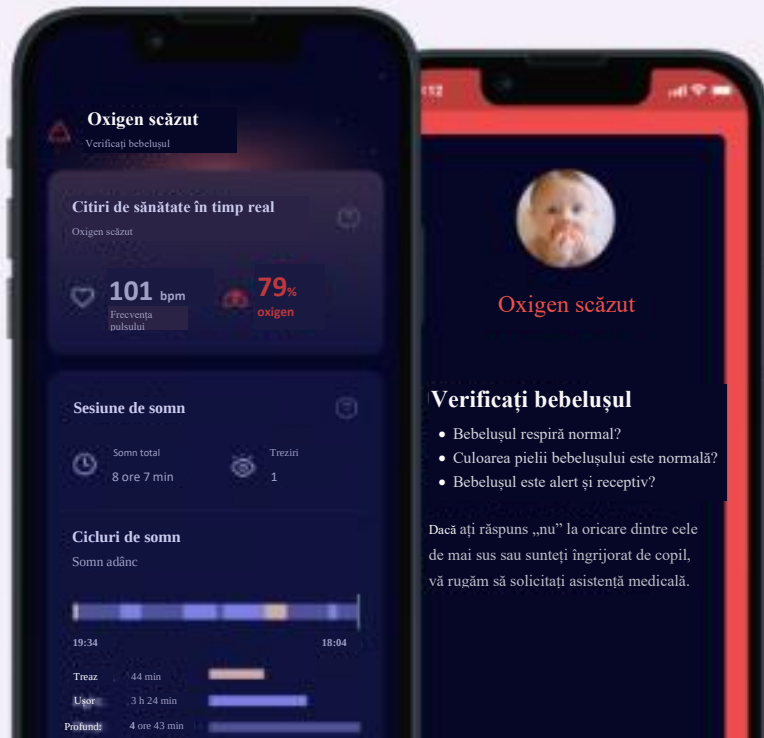


Cum să activați Notificările de sănătate

Activați Notificările de sănătate în setările dispozitivului.

Activarea notificărilor de sănătate

Pentru a activa Notificările de sănătate, navigați la setările Șosetei din fila cont.

Apoi comutați pe Notificări de sănătate și finalizați învățarea necesară. Vi se va cere să testați sunetul notificării roșii pentru a finaliza instructajul.

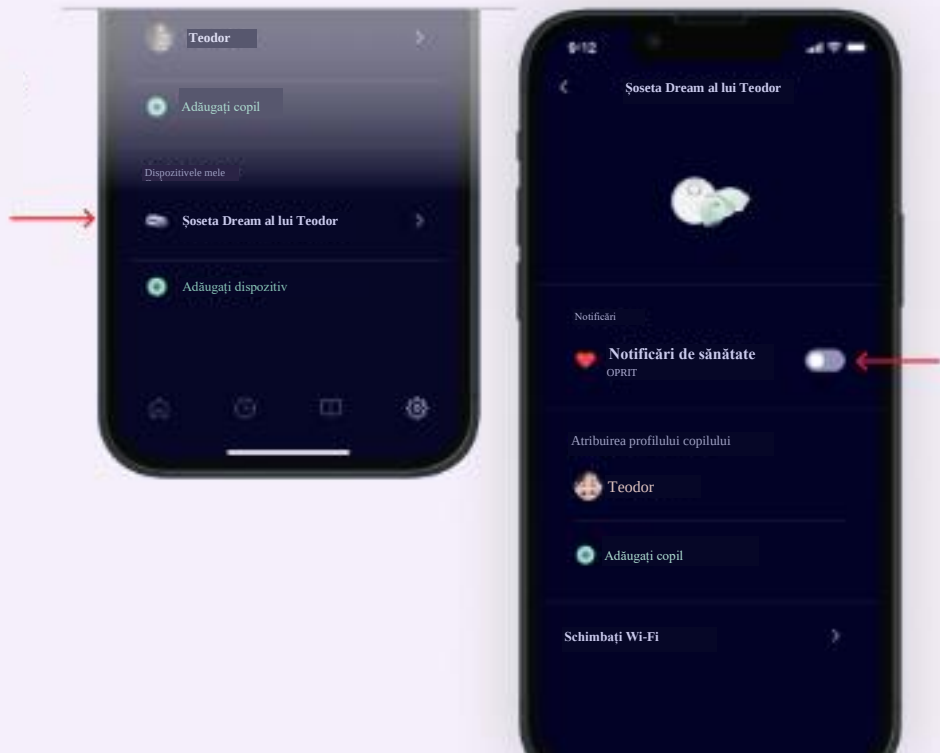

Intervalele normale pentru citiri în timp real

Când primiți o notificare roșie, primul lucru pe care ar trebui să-l faceți este să vă verificați copilul și să vedeți dacă este bine. Lucrurile de verificat sunt respirația copilului, culoarea pielii (este albastru sau palid?), activitatea și vigilența. Dacă aveți o îngrijorare că copilul dvs. nu este bine, vă rugăm să solicitați asistență medicală.

Pentru mai multe informații despre citirile normale de sănătate, consultați Secțiunea 7.2 din Manualul de utilizare al șosetei Dream

Frecvența pulsului

Odată ce notificările de sănătate sunt activate, aplicația va afișa o valoare în timp real a frecvenței pulsului copilului dvs. Este normal ca copilul dvs. să aibă un puls mai scăzut în timp ce doarme decât în timp ce este treaz. De asemenea, este normal ca copilul dvs. să aibă variabilitate pe tot parcursul sesiunii, pe măsură ce se trezește și adoarme, se răsuște, se întoarce sau plânge. Vizitați [healthychildren.org](https://www.healthychildren.org) pentru mai multe informații sau consultați medicul pentru nelămuriri.

Vârstă	Frecvența pulsului în somn normal	Frecvența pulsului la trezire normală
0-3 luni	90-160 BPM	100-205 BPM
4-12 luni	90-160 BPM	100-180 BPM
12-18 luni	80-120 BPM	98-140 BPM

Saturația în oxigen

Este normal ca saturația în oxigen a copilului dvs. să scadă atunci când doarme și chiar să fluctueze în timpul somnului, cu diferitele poziții și stări de somn. Un nivel normal de saturație cu oxigen este peste 90%, cu toate acestea, poate fi obișnuit ca copilul să scadă sub 90% din când în când. Pentru citiri prelungite sau frecvente sub 90%, verificați copilul dvs., poate fi necesar să consultați medicul.

Vâr	Nivel normal de saturație cu oxigen
0 luni - 18 luni	90-100%

Dacă credeți că notificarea de sănătate a fost trimisă din greșală, este posibil ca aceasta să fie cauzată de una dintre următoarele:

- Plasarea șosetei
- Mișcare sau plâns
- Hrănire/Eructație
- Picioare reci

Ghid de depanare

Utilizați următorul ghid de depanare pentru a rezolva problemele legate de configurare, conectare și funcționare. Pentru informații despre notificările de depanare, inclusiv notificările tehnice, consultați pagina anterioară.

Problemă	Cauze posibile	Acțiuni
Nu se poate vedea Owllet Wi-Fi în timpul configurării	Stația de bază nu este pornită	Conectați stația de bază.
	Deja conectat la o rețea Wi-Fi	Verificați dacă lumina verde Wi-Fi de la partea de jos a stației de bază este aprinsă. Dacă da, puteți sări peste acest pas și să continuați configurarea contului în aplicație.
Wi-Fi-ul de acasă nu poate fi văzut în aplicația Owllet	Routerul dvs. de acasă funcționează în 5,0 GHz (Owllet acceptă doar 2,4 GHz)	Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este conectat la o rețea în 2,4 GHz (majoritatea routerelor cu 5,0 GHz acceptă și 2,4 GHz).
Stația de bază nu se va conecta la Wi-Fi	Parola este incorectă	Verificați din nou parola rețelei Wi-Fi.
	Stația de bază este în afara razei de acțiune a routerului dvs. Wi-Fi	Mutați stația de bază mai aproape de routerul dvs. Wi-Fi pentru configurare.
	Wi-Fi-ul dvs. nu funcționează	Încercați să reporniți dispozitivul mobil și să vă reconectați la Wi-Fi sau să resetați routerul Wi-Fi.
	Wi-Fi necesită autentificare printr-un browser sau are restricții pentru firewall.	Încercați o altă rețea.
	Routerul dvs. de acasă funcționează în 5,0 GHz (Owllet acceptă doar 2,4 GHz)	Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este conectat la o rețea în 2,4 GHz (majoritatea routerelor cu 5,0 GHz acceptă și 2,4 GHz).
Imposibil de conectat la aplicație	Am uitat parola	Resetați parola. Consultați Secțiunea 10.2 din Instrucțiunile de utilizare.
Senzorul nu se conectează la stația de bază	Senzorul este în afara razei de acțiune a stației de bază	Mutați stația de bază într-o altă locație.
	Alte dispozitive interferează cu senzorul	Mutați alte componente electronice aflate în apropierea senzorului sau a stației de bază sau mutați stația de bază într-o altă locație.
Stația de bază nu se înregistrează cu contul de aplicație iOS Owllet	Stația de bază și dispozitivul dvs. mobil nu sunt în aceeași rețea Wi-Fi	Verificați dacă dispozitivul dvs. mobil este conectat la aceeași rețea Wi-Fi ca și stația de bază.
	Stația de bază este deconectată de la Wi-Fi	Verificați lumina verde a Wi-Fi din partea de jos a stației de bază. Ar trebui să fie aprinsă. Dacă nu, atunci încercați să reconectați stația de bază la rețeaua Wi-Fi.

Problemă	Cauze posibile	Acțiuni
Stația de bază este deconectată de la internet.	Stația de bază este în afara raza de acțiune a routerului dvs. Wi-Fi.	Apropiati stația de bază și routerul Wi-Fi unul de celălalt. (NOTĂ: nici extensiile de rază Wi-Fi, nici routerele secundare nu vor ajuta.)
	Wi-Fi-ul de acasă nu funcționează.	Resetați routerul Wi-Fi.
Aplicația se resetează și solicită configurarea din nou a sistemului	Stația de bază a fost înregistrată la un alt cont de utilizator.	Stația de bază poate fi înregistrată doar la un singur cont la un moment dat. Utilizați un singur cont pentru toți îngrijitorii.
	Un alt cont a fost utilizat în timpul autentificării.	Deconectați-vă din aplicație și conectați-vă cu contul corect.
Nu se poate deconecta din aplicație	Configurarea este incompletă	Finalizați configurarea sau dezinstalați și apoi reinstalați aplicația.

Pentru informații suplimentare, consultați următoarele secțiuni din Manualul de utilizare:

SECȚIUNE	TITLUL SECȚIUNII	SECȚIUNE	TITLUL SECȚIUNII
1	Informații generale	5	Configurare
1.1	Operator economic	7	Utilizarea aplicației Owlet Dream
2	Informații de siguranță	6.3	Notificări și indicatori
4.3	Stație de bază	8	Curățarea șosetei și a senzorului
4.4	Senzor	11	Depanare
4.5	Șosetă	12	Informații tehnice

Aveți nevoie de ajutor?

Contactați Serviciul Clienți Owlet Baby Care
Owlet Baby Care, Inc.
3300 N Ashton Blvd., Suite 300
Lehi, UT, 84043, SUA
www.owletcare.com